

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НКИП.408121.100 РЭ

ИТС-1



ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ



ИНТЕРПРИБОР

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	2
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА.....	3
3.1 Принцип работы.....	3
3.2 Устройство прибора	4
3.3 Клавиатура.....	5
3.4 Структура меню	5
4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
5 РАБОТА С ПРИБОРОМ	6
5.1 Подготовка к работе и включение.....	6
5.2 Подготовка образцов	7
5.3 Проведение измерений	7
5.4 Расчет теплового сопротивления	8
5.5 Просмотр данных предыдущих измерений	10
5.6 Установка даты и времени	11
5.7 Калибровка прибора	12
6 ПОВЕРКА.....	13
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	13
9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	14
10 УТИЛИЗАЦИЯ	14
11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
12 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	15
13 КОМПЛЕКТНОСТЬ	16
Методика поверки МП-2413-0004-2006.....	17

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения характеристик, принципа работы, устройства, конструкции и порядка использования измерителя теплопроводности ИТС-1 (далее - прибор) с целью правильной его эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора, улучшением его технических и потребительских качеств, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Эксплуатация прибора допускается только после изучения руководства по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее руководство по эксплуатации. Актуальную версию руководства можно скачать со страницы продукта на сайте производителя: <https://www.interpribor.ru/>

При возникновении каких-либо затруднений в работе с прибором и при отсутствии необходимой информации в данном руководстве, необходимо позвонить по номеру, указанному в п.11.9.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Прибор предназначен для профессионального применения. Перед началом работы с прибором внимательно изучите требования нормативных документов на используемый метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. С перечнем нормативных документов можно ознакомиться в разделе 12 настоящего РЭ.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

1.1 Прибор предназначен для измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительных и теплоизоляционных материалов методом стационарного теплового потока в соответствии с ГОСТ 7076 для работы на образцах в виде прямоугольного параллелепипеда, наибольшие (лицевые) грани которого имеют форму квадрата с размерами 150 × 150 мм.

Прибор может использоваться при контроле качества выпускаемой продукции на предприятиях, производящих строительные и теплоизоляционные материалы, а также при обследовании зданий, сооружений и конструкций.

1.2 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 10 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.3 Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения теплопроводности, Вт/(м·К)	0,02...1,5
Диапазон измерения теплового сопротивления, м ² ·К/Вт	0,01...1,5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения теплопроводности и теплового сопротивления, %	± 5,0
Время измерения, ч	0,5...2,5
Напряжение питания, В	~ 220 ± 22
Потребляемая мощность, Вт, не более	120
Габаритные размеры прибора, мм, не более	290 × 190 × 135
Масса, кг, не более	6,5

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1 Принцип работы

Принцип действия прибора основан на создании проходящего через исследуемый плоский образец стационарного теплового потока. По величине этого теплового потока, температуре противоположных граней образца и его толщине вычисляется теплопроводность образца λ по формуле:

$$\lambda = \frac{d \times q}{\Delta T}, \quad (1)$$

где d - толщина образца;

q - плотность теплового потока, проходящего через образец;

ΔT - разность температур между противоположными гранями образца.

Тепловое сопротивление R образца вычисляется по формуле:

$$R = \frac{\Delta T}{q} \quad (2)$$

3.2 Устройство прибора





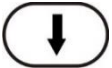




Прибор состоит из измерительной ячейки (теплозащитный кожух, нагреватель и холодильник) и электронного блока, размещённых в едином корпусе.

На лицевой панели прибора расположены 9-ти кнопочная клавиатура и графический индикатор. На задней торцевой стенке расположены выключатель, разъём шнура сетевого питания с защитными предохранителями: основным и запасным.










Рисунок 1 – Внешний вид измерителя теплопроводности ИТС-1

3.3 Клавиатура

	- Включение и отключение процесса измерения
	- Перевод прибора в режим измерения - Фиксация в памяти очередного результата
	- Выход в главное меню из режима измерения - Вход и выход из пунктов главного меню и подменю
	- Включение и выключение подсветки дисплея
 	- Выбор строки меню - Установка значений параметров и ускоренного просмотра памяти по датам
 	- Управление курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки параметров работы - Просмотр памяти результатов по номерам (из режима измерений)
	- Быстрый переход в начало меню, выход в верхнее меню - Сброс устанавливаемых параметров в начальное состояние - Удаление результатов из архива

3.4 Структура меню

При включении прибора дисплей индицирует название прибора и текущие дату и время. Через несколько секунд прибор переходит в режим измерений, при этом на дисплее индицируется температура окружающей среды, разница температур между холодной и горячей пластинами, текущие дата и время. Для запуска процесса измерений следует нажать кнопку , а для перехода в режим меню - кнопку .

Режим меню. Чтобы войти в любой из пунктов меню, нужно выбрать его кнопками  или  и нажать кнопку . Выход из любого пункта меню также осуществляется кнопкой . Для перехода в режим измерений нажать кнопку .

Пункт меню «Калькулятор» служит для расчёта теплового сопротивления по известной теплопроводности образца. В этом же пункте меню можно рассчитать значение необходимой

толщины материала при заданном тепловом сопротивлении и известной теплопроводности или значение теплопроводности материала, если известны его толщина и тепловое сопротивление.

Пункт меню «Дата и время» служит для установки текущих времени и даты.

Пункт меню «Настройка» содержит подменю «Калибровка» и «Заводские установки» и позволяет скорректировать показания прибора на 3 эталонных образцах теплопроводности, а также вернуть заводские установки.

Пункт меню «Язык» позволяет выбрать английский или русский язык текстовых сообщений.

Пункт меню «О приборе» содержит информацию о названии прибора и версии программного обеспечения.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При работе с прибором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, действующие в условиях работы конкретного производства, технологии, оборудования и т.п.

4.2 Прибор не содержит компонентов, опасных для жизни и здоровья пользователя.

4.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0 имеет рабочую изоляцию и элемент заземления, провод для присоединения к источнику питания имеет заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом;

5 РАБОТА С ПРИБОРОМ

5.1 Подготовка к работе и включение

Перед включением прибора необходимо убедиться, что подключена нагревательная пластина через разъём на задней торцевой стенке прибора. Далее следует включить прибор в сеть и выключателем на задней торцевой стенке прибора включить питание, при этом на несколько секунд на дисплее индицируется название прибора и его версия, после чего прибор переходит в режим измерений. Сетевая розетка (евро) должна иметь защитное зануление на третьем контакте.

Вентилятор, расположенный на боковой стенке прибора должен иметь зазор от стен либо других предметов не менее, чем 50 мм.

5.2 Подготовка образцов

Для измерений изготавливают образцы в виде прямоугольного параллелепипеда, наибольшие (лицевые) грани которого имеют форму квадрата с размерами 150 × 150 мм. Толщина образцов должна находиться в диапазоне 5...35 мм.

Грани образца, контактирующие с рабочими поверхностями плит прибора, должны быть плоскими и параллельными. Отклонение лицевых граней жесткого образца от параллельности не должно быть более 0,5 мм.

Жёсткие образцы, имеющие разную толщину и отклонения от плоскостности, шлифуют.

Толщину образцов измеряют штангенциркулем с погрешностью не более 0,1 мм в четырёх углах на расстоянии $(50,0 \pm 5,0)$ мм от вершины угла и посередине каждой стороны.

За толщину образца принимают среднеарифметическое значение результатов всех измерений.

Следует учитывать, что при измерении теплопроводности наибольший вклад в погрешность вносят боковые потери, обусловленные неидеальностью тепловой изоляции измерительной ячейки, и тепловое сопротивление переходов образец-нагреватель и образец-холодильник, вызванные неплоскостностью рабочих поверхностей образца. Исходя из этого, для проведения измерений с наименьшей погрешностью для измерения теплопроводности теплоизоляционных материалов, следует выбирать образцы минимальной толщины (желательно до 20 мм, допустимо до 25 мм). Для измерения теплопроводности образцов с высокой теплопроводностью необходимо иметь образцы максимальной толщины (желательно до 20...30 мм, допустимо до 35 мм), кроме того, рабочие грани образцов должны иметь минимальные отклонения от плоскостности.


5.3 Проведение измерений

Для проведения измерений необходимо вставить в измерительную ячейку между холодильником и нагревателем образец, защелкнуть фиксаторы на корпусе, после чего прижать образец

с требуемым усилием фиксирующим винтом до появления 2-3 щелчков при повороте винта.




Внимание! Чтобы избежать лишних царапин на измерительных пластинах нагревателя и холодильника следует образец и нагреватель поднимать и опускать строго вертикально вверх.

Нажатием кнопки  включить режим измерения. Прибор запросит с пользователя толщину образца в мм и ожидаемое значение его теплопроводности. Ввод ориентировочного значения теплопроводности ускоряет процесс замера. Затем автоматически включится режим измерения, по окончании которого прибор выдаст значение теплопроводности измеряемого образца и автоматически начнет новое измерение.

Рекомендуется проводить 3 измерения на одном образце и брать среднее значение. Первый замер наименее точный. Температура окружающей среды в течении цикла измерений должна быть стабильной $\pm 0,5$ °С. При этом условии и толщине образца 10-25 мм время первого замера в цикле 50 мин., следующих 25 мин.

Для уменьшения погрешности измерений температура и относительная влажность воздуха помещения, в котором проводят испытания, должны быть соответственно (22 ± 5) °С и (50 ± 10) %.

Для остановки серии измерений необходимо нажать кнопку «» и подтвердить необходимость остановки. Можно также просто выключить прибор, при этом результаты уже проведенных измерений сохранятся в энергонезависимой памяти прибора.

5.4 Расчет теплового сопротивления

Для расчета теплового сопротивления (R) материала по известной теплопроводности (λ) и толщине (d) необходимо из главного меню выбрать пункт «**Калькулятор**»:

Калькулятор
$R = d / \lambda$
$R = \Delta T / q$

В появившемся меню нужно выбрать первый вариант расчета - по формуле « $R=d / \lambda$ »:

<input checked="" type="checkbox"/> $R=1,0526 \text{ м}^2\text{°К} / \text{Вт}$
<input type="checkbox"/> $d=0 \text{ м } 040,0 \text{ мм}$
<input type="checkbox"/> $\lambda=0,0380 \text{ Вт} / \text{м}^{\circ}\text{К}$
Теплопроводность

Кнопками \uparrow , \downarrow установить мигающий значок « v » выбора результата в первую строку. Затем кнопкой \leftarrow или \rightarrow перейти к одной из изменяемых цифр в строке « $d=$ » или « $\lambda=$ » и кнопками \uparrow , \downarrow установить нужное значение. Аналогично установить в нужные значения все цифры значений толщины (d) и теплопроводности (λ). При изменении любого из чисел автоматически будет изменяться значение теплового сопротивления R .

В этом же пункте меню можно рассчитать значение необходимой толщины материала при заданном тепловом сопротивлении и известной теплопроводности или значение теплопроводности материала, если известны его толщина и тепловое сопротивление. Для этого кнопками \leftarrow , \rightarrow нужно перейти к мигающему значку « v » и кнопкой \uparrow или \downarrow переместить его в строку, которая должна быть результатом. Для выхода из меню нажмите кнопку F или C .

Расчет теплового сопротивления (R) образца по известной плотности теплового потока (q) и разности температур на его стенках (ΔT). При известной величине плотности теплового потока через образец и разности температур на его поверхностях можно вычислить тепловое сопротивление этого материала. Для этого необходимо из главного меню выбрать пункт «**Калькулятор**». В появившемся меню нужно выбрать второй вариант расчета – по формуле « $R=\Delta T / q$ »:

<input checked="" type="checkbox"/> $R=1,0526 \text{ м}^2\text{°К} / \text{Вт}$
<input type="checkbox"/> $\Delta T=157,89 \text{ °К}$
<input type="checkbox"/> $q=0150.000 \text{ Вт} / \text{м}^2$
Теплопроводность

Кнопками \uparrow , \downarrow установить мигающий значок «v» выбора результата в первую строку. Затем кнопкой \leftarrow или \rightarrow перейти к одной из изменяемых цифр во второй или третьей строке и кнопками \uparrow , \downarrow установить нужное значение. Аналогично установить в нужные значения все цифры значений разности температур (ΔT) и плотности теплового потока (q). При изменении любого из чисел автоматически будет изменяться значение результата.

В этом же пункте меню можно рассчитать значение разности температур на стенках образца с известным тепловым сопротивлением при заданной плотности теплового потока, установив мигающий значок «v» в строку « $\Delta T =$ ». Можно также вычислить значение плотности теплового потока, проходящего через образец, если известны его тепловое сопротивление и разность температур на стенках, переместив мигающий значок «v» в строку « $q =$ ». Для выхода из меню нажмите кнопку F или C .

5.5 Просмотр данных предыдущих измерений

Для просмотра результатов предыдущих измерений необходимо из режима измерений войти в режим просмотра архива, нажав одну из кнопок со стрелками. Будет показан последний из измеренных результатов:


Запись №	3
$\lambda = 0.191 \text{ Вт/м}^\circ\text{С}$	
Чтв, 16 дек 2004	

Для просмотра предыдущего результата необходимо нажать кнопку \leftarrow . Для просмотра следующего результата необходимо нажать кнопку \rightarrow .

Выбор просматриваемого значения (теплопроводность λ , тепловое сопротивление R или значение теплового потока при измерении q) производится кнопкой M . По кнопке \uparrow можно перейти к показу среднего значения и отклонений двух, трех и более соседних результатов измерений:



№ 2-3 (2 зап.)
 $\lambda = 0.191$ Вт/м°C
-0,5 % +0,2 %

Это полезно, если была проведена серия измерений одного образца (или одинаковых образцов).

По кнопке  можно вернуться к просмотру одиночного результата и перейти к просмотру подробностей измерения:

Запись № 3
 $h = 10.0$; $\Delta T = 7,00^\circ$
 $P = 0.730$ W
 $t = 0$ час 55 мин





Здесь **h** - толщина образца в мм, ΔT – разница между температурой верхней и нижней граней образца, **P** – мощность нагрева образца, **t** – время измерения.


Для возврата в режим измерений нужно нажать кнопку  или .

5.6 Установка даты и времени




Выбрать пункт главного меню «**Дата и время**» и войти в него, нажав кнопку «**F**»:

Дата и время
12:48:■
8 авг 2006
Вторник

Выбор изменяемого параметра (часы, минуты, секунды, число, месяц, год) производится кнопками , . Кнопками ,  изменяется значение выбранного параметра.

Уход показаний встроенных часов может быть достаточно большим - до двух минут в месяц. В приборе реализована автоматическая коррекция хода часов, позволяющая добиться точности хода часов до нескольких секунд в месяц. Переход в меню изменения коррекции хода часов произойдет по окончании установки времени при нажатии на кнопку .

Коррекция
хода часов
■ . сек / сут
(10,4 сут.)

Изменение значения коррекции производится кнопками ,  с шагом 0,1 секунды в сутки. В скобках указано время, прошедшее с момента последнего изменения времени или коррекции часов. Выход в главное меню – по кнопке .



5.7 Калибровка прибора




Внимание! Данная операция может производиться потребителем самостоятельно только при наличии у него комплекта из трех образцовых мер с аттестованными значениями теплопроводности.

Калибровка прибора может быть выполнена при помощи пункта главного меню «**Настройка**» подменю «**Калибровка**» для трех образцов разной теплопроводности.

Органическое стекло
Эталон: Измерено:
0,1950 0,1950
Коррекция +0.0 %

Перед входом в меню калибровки необходимо выполнить измерение (или серию измерений) теплопроводности образцовой меры с известным значением теплопроводности. Затем войти в меню калибровки и, перемещая курсор кнопками , , изменить значения теплопроводности эталона и измеренного прибором значения этой теплопроводности. В нижней строке дисплея при этом будет показано изменение значения корректирующего коэффициента, участвующего в вычислении прибором теплопроводности.

По окончании ввода выйти из меню калибровки, нажав кнопку . Все прошлые и последующие измерения теплопроводности материалов будут скорректированы с учетом корректирующих коэффициентов для трех эталонов.

6 ПОВЕРКА

6.1 Поверку прибора проводят по методике поверки «Измеритель теплопроводности ИТС-1. МП-2413-0004-2006. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».


6.2 Интервал между поверками - 1 год.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Прибор требует аккуратного и бережного обращения для обеспечения заявленных технических характеристик.

7.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, оберегать от падений, ударов, вибрации, пыли и сырости. Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, удалять пыль сухой и чистой фланелью и производить визуальный осмотр прибора, уделяя особое внимание отсутствию пыли, грязи и посторонних предметов на дисплее и в измерительной ячейке.

7.3 По завершении измерений измерительную ячейку необходимо очистить от частиц материала, грязи и тщательно протереть чистящими салфетками для мониторов. Особое внимание следует обратить на сохранность рабочих поверхностей нагревателя и холодильника: дополнительные риски, царапины оказывают влияние на точность измерения теплопроводности. Наиболее существенным образом это влияет на точность измерения теплопроводности материалов с высокой теплопроводностью.

7.4 При плохой освещенности помещения в приборе предусмотрена подсветка дисплея, включаемая кнопкой .

7.5 Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие кнопок, то необходимо на несколько секунд выключить питание прибора, затем включить и снова проверить работоспособность прибора.

7.6 Прибор является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. При всех видах неисправностей необходимо обратиться к изготовителю.

8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак утверждения типа;
- условное обозначение прибора;
- порядковый номер и дату выпуска.

8.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания ставят пломбу.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Транспортирование приборов должно осуществляться в упакованном виде любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

9.2 Расстановка и крепление ящиков с приборами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга.

9.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192.

9.4 Температурные условия транспортирования приборов от минус 25 °С до плюс 50 °С.

9.5 Упакованные приборы должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

Специальных мер для утилизации материалов и комплектующих элементов, входящих в состав прибора, не требуется, так как отсутствуют вещества, представляющие опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов требованиям технических условий. Гарантийный срок - 18 месяцев с момента продажи прибора.

11.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя.

11.3 Гарантийное обслуживание осуществляется в месте нахождения предприятия-изготовителя. Срок гарантии на прибор увеличивается на время его нахождения в ремонте.

Прибор предъявляется в гарантийный ремонт в следующей комплектации: измерительный прибор (в комплекте с кабелем соединительным и винтом), руководство по эксплуатации, кофр, контрольные образцы теплопроводности (КОТ) (при наличии - по усмотрению отправителя), транспортная упаковка, обеспечивающая сохранность и надлежащую транспортировку оборудования.



Внимание! Оборудование для гарантийного ремонта должно быть предоставлено в чистом виде.

11.4 Срок проведения ремонтных работ - 30 рабочих дней с момента получения прибора предприятием-изготовителем.

11.5 Срок замены прибора - 30 рабочих дней с момента получения прибора предприятием-изготовителем при наличии существенного недостатка.

11.6 Недополученная в связи с неисправностью прибора прибыль, транспортные расходы, а также косвенные расходы и убытки не подлежат возмещению.

11.7 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся запчасти и комплектующие (соединительные кабели, разъёмы и т.п.).

11.8 Гарантийные обязательства теряют силу, если:

- нарушены заводские пломбы;
- прибор подвергался механическим, тепловым или атмосферным воздействиям;
- прибор вышел из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, агрессивных сред;
- на приборе удален, стерт, не читается или изменен заводской номер.

11.9 Гарантийный ремонт и организацию периодической проверки осуществляет ООО НПП «Интерприбор»: 454080, Челябинск, а/я 12771, бесплатные звонки по России 8-800-775-05-50, тел. (351) 729-88-85.

12 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

13 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Измерительный прибор (в комплекте с кабелем соединительным и винтом), шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Кофр, шт.	1*

* Поставляется по заказу

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель теплопроводности ИТС-1 (в дальнейшем «ПРИБОР»), предназначенный для измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительных и теплоизоляционных материалов методом стационарного теплового потока и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал - 1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и последовательность операций	Номер пункта методики поверки	Обязательность проведения операции	
		первичной поверки	периодической поверки
Внешний осмотр	5.1	+	+
Опробование	5.2	+	+
Проверка электрического сопротивления изоляции	5.3	+	-
Определение относительной погрешности	5.4	+	+
Определение диапазона измерений	5.5	+	-
Подтверждение соответствия программного обеспечения	5.6	+	+

1.2 При отрицательных результатах одной из операций поверка прекращается.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в таблице 2

Таблица 2

№ пункта методики поверки	Наименование средства измерения, номер нормативно-технической документации, метрологические и технические характеристики
5.3	Мегаомметр Ф4102, напряжение 100 В
5.4, 5.5	Образцовая мера теплопроводности из органического стекла 1 разряда (эталонные материалы ВНИИМ, регистр. № 01.01.001), границы относительной погрешности $\pm 3 \%$; Образцовая мера теплопроводности из кварцевого стекла 1 разряда (эталонные материалы ВНИИМ, регистр. № 01.01.003), границы относительной погрешности $\pm 3 \%$; Образцовая мера теплопроводности «ПЕНОПЛЭКС®» 1 разряда (эталонные материалы ВНИИМ, регистр. № 01.01.006), границы относительной погрешности $\pm 3 \%$.

Все применяемые средства поверки должны быть поверены в установленном порядке.

Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих выполнение измерений с требуемой точностью.

3 УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

3.1 При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия, приведенные ниже:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление 84-106,7 кПа;
- напряжение питания $220 \pm 22 \text{ В}$;
- частота сети $50 \pm 1 \text{ Гц}$.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12997.

4.2 По уровню электробезопасности ПРИБОР должен соответствовать классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие ПРИБОРА следующим требованиям:

- комплектность и маркировка должны соответствовать паспорту на ПРИБОР;

- изделия, входящие в состав ПРИБОРА, не должны иметь механических повреждений;

- органы управления должны перемещаться без заеданий.

ПРИБОР, не удовлетворяющий указанным требованиям, к дальнейшему проведению поверки не допускается.

5.2 Опробование

При опробовании выполняют следующие операции:

- проверяют работоспособность ПРИБОРА в соответствии с эксплуатационной документацией на него;

- производят подготовку ПРИБОРА к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

Электрическое сопротивление изоляции проверяют между входными цепями электропитания ПРИБОРА и заземляющим контактом на вилке электропитания с помощью мегаомметра с номинальным напряжением 100 В.

Отчет показаний, определяющих электрическое сопротивление изоляции, проводят по истечении 1 мин. после приложения напряжения между каждым из электрических выводов и заземляющим контактом.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм - при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %.

5.4 Определение относительной погрешности.

5.4.1 Для определения относительной погрешности прибора проводят 5 измерений теплопроводности и теплового сопротив-

ления образцовой меры из органического стекла (табл.2) в соответствии с руководством по эксплуатации при температуре $(20 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$.

5.4.2 Находят среднее арифметическое значение теплопроводности (теплового сопротивления) $\lambda_{\text{ср}}$ ($R_{\text{ср}}$):

$$\lambda_{\text{ср}} = \frac{\sum \lambda_i}{5}$$

5.4.3 Случайную составляющую погрешности прибора определяют по формуле:

$$\Delta_0 = t_p \times S,$$

где S - среднее квадратическое отклонение измерений, вычисляемое по формуле:

$$S = \frac{\sqrt{\sum (\lambda_i - \lambda_{\text{ср}})^2}}{n \cdot (n - 1)},$$

t_p - коэффициент Стьюдента, зависящий от принятой доверительной вероятности P и числа измерений n . При $P=0,95$ и $n=5$ $t_p=2,57$.

5.4.4 Систематическую составляющую погрешности прибора определяют по формуле:

$$\Delta_c = |\lambda_{\text{ср}} - \lambda_{\text{ом}}|,$$

где $\lambda_{\text{ом}}$ ($R_{\text{ом}}$ ом)- значение теплопроводности (теплового сопротивления) образцовой меры, взятое из свидетельства при температуре измерения;

$$R_{\text{ом}} = d / \lambda_{\text{ом}}$$

где d - толщина образцовой меры.

Относительную погрешность прибора вычисляют по формуле:

$$\delta = 100 \cdot (\Delta_c + \Delta_0) / \lambda_{\text{ом}}$$

Результат аттестации считают положительным, если полученное значение относительной погрешности прибора не превышает $\pm 5 \%$.

5.5 Определение диапазона измерения

Диапазон измерения определяют посредством двух образцовых мер из кварцевого стекла и «ПЕНОПЛЭКС®» (табл.2) в соответствии с руководством по эксплуатации. Диапазон измерений теплопроводности должен составлять 0,02-1,5 Вт/(м·К). Диапазон измерений теплового сопротивления должен составлять 0,01 - 1,5 м²·К/Вт.

5.6 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Проверку соответствия программного обеспечения (далее - ПО) проводить следующим образом.

Включить электронный блок на приборе. Находясь в главном меню, кнопкой **F** войти в меню «**О приборе**». На дисплее появится краткая информация о предприятии-изготовителе и идентификационный номер версии программного обеспечения - 29.08.2011.

Нажать кнопку **M**. На дисплее появится информация о цифровом идентификаторе программного обеспечения (контрольной сумме исполняемого кода) - **F5E1**, подтверждающая соответствие программного обеспечения.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, установленной метрологической службой, проводящей поверку.

6.2 Положительные результаты периодической поверки ПРИБОРА оформляют выдачей свидетельства о поверке установленного образца.

6.3 При отрицательных результатах поверки ПРИБОР бракуют с выдачей извещения о непригодности с указанием причин непригодности.

Редакция 2026 06 04